



THE n° 1 for intensive skin care



English

Indications : Veterinus Derma GeL® is an isotonic formulation available in gel or fluid form indicated for intensive and rapid skin care. Veterinus Derma GeL® ensures a uniform porous barrier of protection against bacterial attack, foreign contaminants, avoiding desiccation and maintaining an ideal percentage of moisture. Bandaging the affected area is therefore not required. Certified non-mutagenic and devoid of cytogenotoxicity or irritant and sensitizing effect on epithelial cells, Veterinus Derma GeL® maintains cell viability to a very high rate and consequently favors a rapid hair regrowth in the original color. Staying where it is applied, Veterinus Derma GeL® in gel form will not run off the treated surface.

Directions : Daily cleanse the affected area with warm water or a saline solution, so as to preserve epithelial cells from irritation. Apply Veterinus Derma GeL® generously several times a day, as needed. To help prevent skin proliferation, extend application to the surrounding area.

Caution : When needed, bandage over the gel. After 24 hours, leave surface uncovered as the product ensures a protective barrier (keeping surface moist). Avoid the use of this product on abnormal cell proliferation : warts, ringworm, mud fever,... Ensure cap is replaced after use. Avoid all contact to inside of cap or tip of tube/bottle to prevent product contamination. For animal use only. Keep in a cool dark place away from heat, frost and toxic radiation. Keep out of the reach of children.

Quality : Veterinus Derma GeL® is formulated on the basis of an exclusive blend of titrated botanical extracts. Unlike plant tinctures or common extracts which have an active ingredients content that varies according to the period of harvesting, weather conditions, quality of soil,..., Veterinus Derma GeL® contains titrated extracts.

Safety : Veterinus Derma GeL® is totally devoid of toxic or prohibited substances. It is safe to use in competition, during gestation, when licked...

Ingredients : Titr. Polysaccharides (Pyrus Sorbus extr.) ; Centella Asiatica (titr. extr.) ; Calendula Officinalis (titr. extr.) ; Salvia Officinalis extr. ; Thymus Vulgaris extr. ; Origanum Majorana extr. ; Lavandula Officinalis extr. ; Propylene Glycol ; Hydrogenated Castor Oil ; Sodium Bicarbonate ; Glycerin ; Alcohol ; Aqua Purificata ; Carbomer (for the gel form).

Nederlands

Indicaties: Veterinus Derma GeL® is een isotone formulering verkrijgbaar in gel- of vloeibare vorm, geïndiceerd voor intensieve en snelle huidverzorging. Veterinus Derma GeL® zorgt voor een gelijkmatige poreuze barrièrebescherming tegen bacteriële aanvallen, vreemde verontreinigingen, vermijdt uitdroging en houdt een ideaal vochtigheidspercentage in stand. Verbanden leggen op de aangetaste plek is dus niet nodig. Veterinus Derma GeL® is niet-mutageen, cytogenotoxisch, irriterend en sensibiliserend voor de epitheelcellen en houdt de levensvatbaarheid van de cellen in zeer hoge mate in stand en bevordert daardoor een snelle hergroei van het haar in de oorspronkelijke kleur. Veterinus Derma GeL® in gelvorm blijft op de plaats waar het is aangebracht en loopt niet van het behandelde oppervlak af.

Gebruiksaanwijzing: Dagelijks de aangedane plek reinigen met warm water of een zoutoplossing, om de epitheelcellen te vrijwaren van irritatie. Veterinus Derma GeL® meerdere malen per dag royaal aanbrengen, naar behoefte. Om huidwoekering te helpen voorkomen, de toepassing uitbreiden op het omliggende gebied.

Let op: Indien nodig, verband over de gel aanbrengen. Na 24 uur het oppervlak onbedekt laten, aangezien het product voor een beschermende barrière zorgt (waardoor het oppervlak vochtig blijft). Vermijd het gebruik van dit product op abnormale celproliferatie: wratten, ringworm, modderkoorts... Zorg ervoor dat de dop na gebruik wordt teruggeplaatst. Vermijd elk contact met de binnenkant van de dop of de tip van de tube/fles om productverontreiniging te voorkomen. Uitsluitend voor gebruik bij dieren. Bewaren op een koele donkere plaats, uit de buurt van warmte, vorst en giftige straling. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Kwaliteit: Veterinus Derma GeL® is geformuleerd op basis van een exclusief mengsel van getitreerde botanische extracten. In tegenstelling tot plantentincturen of gewone extracten die een actief bestanddeelgehalte hebben dat varieert naargelang de periode van oogsten, de weersomstandigheden, de kwaliteit van de grond..., bevat Veterinus Derma GeL® getitreerde extracten.

Veiligheid: Veterinus Derma GeL® is volledig vrij van toxische of verboden stoffen. Het is veilig te gebruiken bij wedstrijden, tijdens de dracht, bij het likken...

Ingrediënten: Titr. Polysacchariden (Pyrus Sorbus extr.); Centella Asiatica (titr. extr.); Calendula Officinalis (titr. extr.); Salvia Officinalis extr.; Thymus Vulgaris extr.; Origanum Majorana extr.; Lavandula Officinalis extr.; Propyleen Glycol; Gehydrogeneerde Castor Olie; Natrium Bicarbonaat; Glycerine; Alcohol; Aqua Purificata; Carbomer (voor de gel vorm).

**Veterinus
Derma Gel**



DERMA REGENERATOR

THE n° 1 for intensive skin care



Klinisch geval: "Beaver" Mitchell

Ingediend door: Dr. Erin Denney-Jones
Florida Equine Veterinary Services, Inc.
PO Box 120913
Clermont, FL 34712-0913

**Diepe rijtwond veroorzaakt
door prikkeldraad.**

Behandeling:
Eén keer per dag reinigen met een zoutoplossing.

Toepassing: (zonder verband) van Derma GeL® drie keer per dag gedurende de eerste week en vervolgens twee keer per dag.

Let op: Er werden geen andere lokale behandelingen gebruikt.
Antibiotica en pijnstillers toegediend via injectie.


Duur van de behandeling onder klinische observatie: 28 dagen.



Derma GeL® is een hydrogel of "hydrocolloïd verband" dat bestaat uit vernette polymeren met een hoog molecuulgewicht. De formulering en de fysisch-chemische kenmerken ervan vergemakkelijken de verzorging en:


- ✿ Bevordert een verzachtend effect
- ✿ Vermindert pijnniveau's
- ✿ Reguleert ontstekingen
- ✿ Behoudt de levensvatbaarheid van de cellen op 97%
- ✿ Versnelt het genezingsproces

Migration aisée et rapide des nouvelles cellules - baignant dans le milieu de croissance épithéliale, assuré par la structure hydro-colloïde du Derma GeL®.

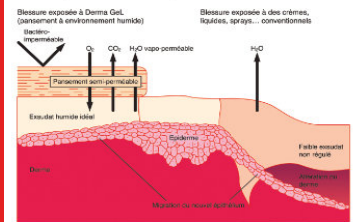


- 97% de viabilité cellulaire favorisant une multiplication et une migration des cellules baignant dans un milieu de croissance idéal
- Régulation du pH et de la température au niveau de la blessure
- Oxygène et nutriments disponibles pour une cicatrisation rapide
- Lavage idéal - préservant les cellules viables
- Perle de viabilité cellulaire favorisant la multiplication et la migration des cellules
- Température et pH perturbés - empêchant desquamation ou ressuage excessive
- Déficience d'oxygène et nutriments - retardant la cicatrisation
- Lavage endommageant les cellules viables

Evaluation de la Viabilité Cellulaire

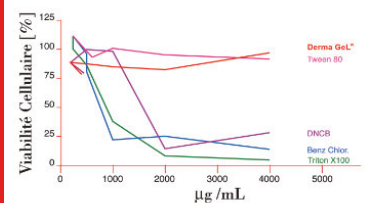

Pourcentage de cellules survivantes dans des modèles cutanés reconstitués incubés en présence de Chlorure de Benzalkonium, de Triton X 100, de Tween 80, ou Dinitrochlorobenzène (DNCRB) et du produit Derma GeL®. Les tissus ont été exposés aux différents produits durant 20 heures à 37°C (95% CO2) après quoi ils ont été soumis au test de viabilité cellulaire. Chaque point représente la moyenne ± DS d'une expérience réalisée en double.

Evaluation of the rate of bacterial colonisation of an open wound exposed to the following bacterial strains:

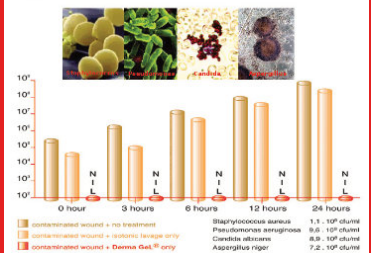

Klinisch geval: Buddy Anderson

Ingediend door: Dr. Thomas E. Hughes
Forreston Veterinary Clinic
PO Box 337
205 First Ave.
Forreston, IL 61030

Verwijdering van een lipoom.

Behandeling:
Tweemaal daags reinigen met een zoutoplossing.
Toepassing (zonder verband) van Derma GeL® driemaal daags gedurende de eerste week, daarna tweemaal daags.

Let op: Er werden geen andere lokale behandelingen gebruikt.
Oraal antibioticum (Clavamox).

Duur van de behandeling onder klinische observatie: 20 dagen.

N.B.: De eigenaar van de hond stuurde de laatste foto (D.44) waarop een perfecte genezing en haargroei te zien zijn.



Rue des Artisans 2 - 4877 Olne - België | Tel : +32 4 227 24 23

info@aipmedical.com | www.aipsutures.com

