



RESORBEERBARE HECHTING

Practicryl 910



Gevlochten Polyglactine 910 PGLA

Type

Gevlochten en gecoate multifilamenten

Weefselreactie

Minimaal

Samenstelling

Polyglactine 910, een copolymeer bestaande uit 90% glycolide en 10% L-lactide

Absorptie

De hydrolytische werking waardoor het materiaal wordt afgebroken, resulteert in een totale absorptie tussen 56 en 70 dagen. Tussen 40% en 50% van de treksterkte blijft over na 21 dagen.

Coating

Poly-glycolide-co-L-lactide en calciumstearaat (<1%)

Presentatie

Doos met 12 hechtingen

Kleur

Violet / Beige - ongeverfd

Tailored for surgery

www.aipsutures.com



RESORBEERBARE HECHTING Practicryl 910



Gevlochten Polyglactine 910 PGLA

Eigenschappen

Hoge treksterkte

+ Uitstekende weefselondersteuning

Synthetisch

+ Minimale weefselreactie

Breekt af door hydrolyse

+ Voorspelbare absorptiesnelheid

Gevlochten structuur

+ Uitstekende verwerkingseigenschappen

+ Hoge flexibiliteit

+ Hoge treksterkte

+ Uitstekende knoopzekerheid

Gecoat multifilament

+ Zachte passage door het weefsel met minimale zaag-, weefselweerstand en trauma

+ Goede knoopsluiting / verstelbaarheid

+ Verminderde capillaire werking

Hermetisch gesloten verpakking

+ Gegarandeerde afdichting en productsteriliteit

Indicaties

Algemene weke delen sluiting en/of ligatie


VOORAL IN :

- + Algemene chirurgie
- + Urologie
- + Huidsluiting
- + Oogheekkundige chirurgie
- + Gastro-intestinale chirurgie
- + Orthopedie
- + Gynaecologie
- + Verloskunde
- + Plastische chirurgie


Contra-indicaties

- Cardiovasculaire chirurgie
- Neurochirurgie
- Omdat het resorbeerbaar is niet te gebruiken wanneer een langdurige wondondersteuning nodig is.
- Voorzichtig bij patiënten met vertraagde wondgenezing (bv. gecompromitteerd immuunsysteem).

Treksterkte

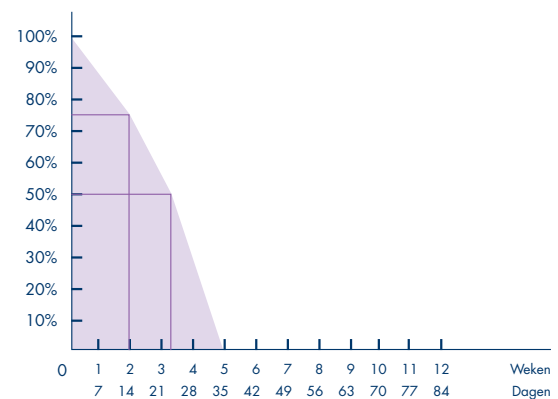

Absorptie

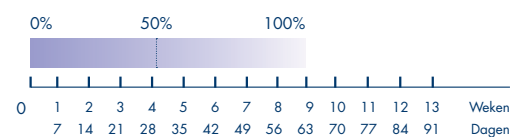

Tailored for surgery

www.aipsutures.com

RESORBEERBARE HECHTING

Practicryl 910



DOZENS

Referentie	Draaddiameter		Naald		Draad (cm)	Naald (mm)	Draad Kleur
	USP	EP	Type	Kromming			
0140T319S90	4/0	1,5	▽	3/8	90	19	Paars
0130T319S90	3/0	2	▽	3/8	90	19	Paars
0130T326S90	3/0	2	▽	3/8	90	26	Paars
0130R230S90	3/0	2	▽	1/2	90	30	Paars
0120T326S90	2/0	3	▽	3/8	90	26	Paars
0120R240S90	2/0	3	▽	1/2	90	40	Paars
0100T326S90	0	3,5	▽	3/8	90	26	Paars
0100T236S90	0	3,5	▽	1/2	90	36	Paars
0101T236S90	1	4	▽	1/2	90	36	Paars

Ons productassortiment is niet beperkt tot de bovenstaande lijst. De lijst wordt slechts als voorbeeld gegeven.