

RESORBEERBARE HECHTING **Practimono**



Monofilament Polydioxanon PDO

Type

Monofilament

Samenstelling

Polydioxanon, een polymeer gemaakt van polyester poly (p-dioxanon)

Coating

None

Kleur

Violet

Weefselreactie

Minimaal

Absorptie

De hydrolytische werking waardoor het materiaal wordt afgebroken, resulteert in een totale absorptie na ongeveer 180 tot 210 dagen. Ongeveer 50% van de treksterkte blijft over na 42 dagen.

Presentatie

Doos met 12 hechtingen of cassette

Tailored for surgery


www.aipsutures.com



Eigenschappen

- ⦿ Hoge initiële treksterkte
 - + *Uitstekende sterktebehoud voor langdurige wondondersteuning*
- ⦿ Synthetisch
 - + *Minimale weefselreactie*
- ⦿ Breekt af door hydrolyse
 - + *Predictable absorption rate*
- ⦿ Monofilament met microscopisch kleine uniforme diameter
 - + *Zachte passage door het weefsel zonder zagen, weefsel trek en trauma*
 - + *Afwezigheid van capillariteit (geen ondersteuning van bacteriële groei)*

- ⦿ Plooibaarheid en zachtheid
 - + *Goede hanteringseigenschappen*
 - + *Gemakkelijk en veilig knopen*
- ⦿ Hermetisch gesloten verpakking
 - + *Gegarandeerde verzegeling en productsteriliteit*

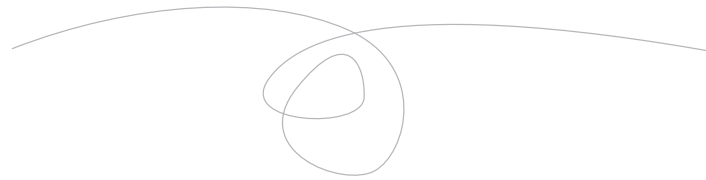

Indicaties

Algemeen sluiten van weke delen


VOORAL IN :

- + Algemene chirurgie
- + Plastische chirurgie
- + Gastro-intestinale chirurgie
- + Urologie
- + Oogheelkundige chirurgie
- + Orthopedie
- + Buikwandsluiting
- + Gynaecologie


Contra-indicaties

- Cardiovasculaire chirurgie
- Neurochirurgie
- Prothetische hulpmiddelen
- Niet te gebruiken wanneer wondondersteuning gedurende meer dan 6 weken vereist is.
- Voorzichtig bij patiënten met vertraagde
- Wondgenezing (bv. gecompromitteerd immuunsysteem).

Treksterkte

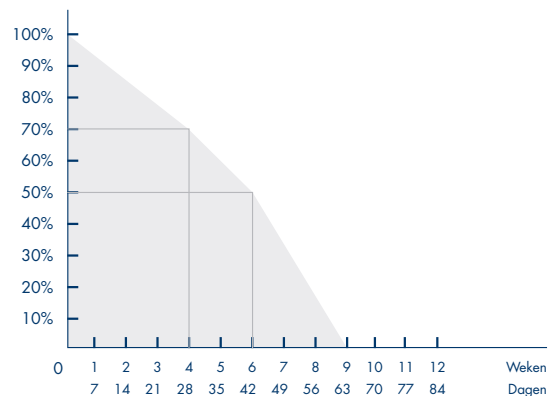

Absorptie

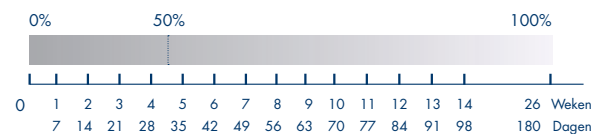

RESORBEERBARE HECHTING

Practimono



DOZENS

Referentie	Draaddiameter		Naald	Naald	Draad (cm)	Naald (mm)	Draad Kleur
	USP	EP	Type	Kromming			
0540T319S90	4/0	1	▽	3/8	90	19	Paars
0530T326S90	3/0	2	▽	3/8	90	26	Paars
0520T326S90	2/0	3	▽	3/8	90	26	Paars
0500T336S90	0	3,5	▽	3/8	90	36	Paars

CASSETTES

Referentie	Draaddiameter		Draad (m)	Draad Kleur
	USP	EP		
MOD04-050	1	4	50	Paars
MOD05-050	2	5	50	Paars

Ons productassortiment is niet beperkt tot de bovenstaande lijst. De lijst wordt slechts als voorbeeld gegeven.